


MiniFinder® Pico

Produktmanual

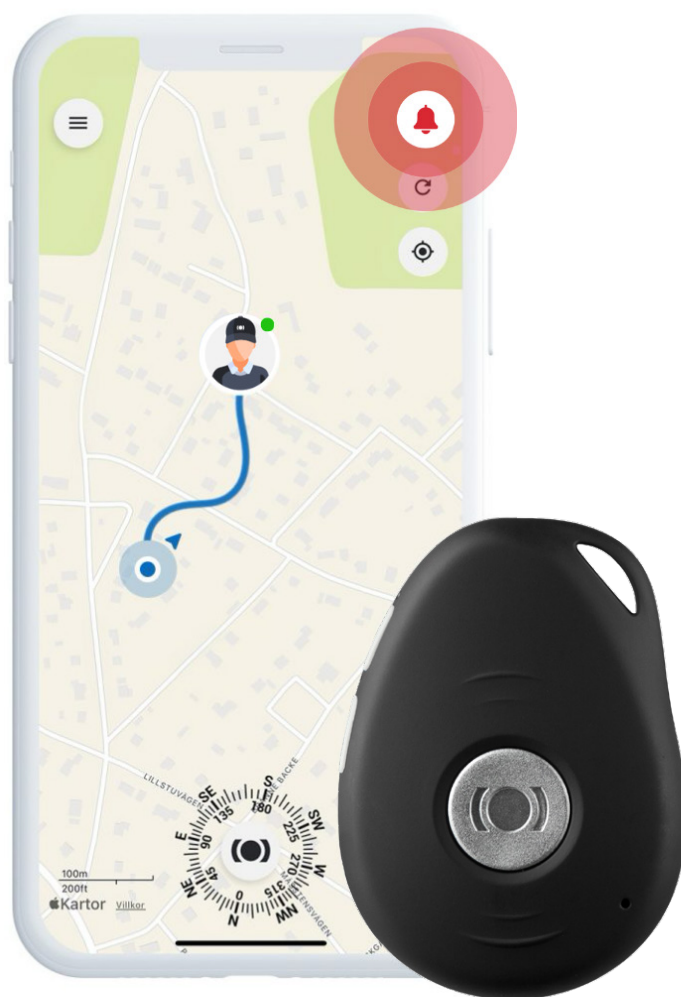

Innholdsfortegnelse

MiniFinder Pico

Pakkens innhold	1
Bruk av produkt	1
Forklaring av LED-lamper	2
Kom i gang	2
Forklaring av talemeldinger	3
Aktivere SOS-Alarm	4
Avbryte SOS-Alarm	4
Fallalarm	5
Spesifikasjoner	6

Pakkens innhold

1 MiniFinder Pico

2 Magnetisk ladekabel

3 Vegglader

1



2



3



Bruk av produkt

1 Lad opp før første gangs bruk

Lad enheten i minst 4 timer før du bruker den for første gang

2 Under lading

Det blå LED-lyset lyser kontinuerlig under lading

Når enheten er fulladet, slukkes det røde LED-lyset

3 Lad enheten

Fest den magnetiske ladekabelen til ladekontaktene på enheten

4 Slå på enheten

Hold inne På/Av-knappen i 1 sekund for å slå på enheten

5 Slå av enheten

Hold inne både SOS-knappen og På/Av-knappen i 2 sekunder for å slå av enheten



Forklaring av LED-lamper

GRØN LED:



Blinker gjentatte ganger = Ringer

Blinker én gang = Søker etter mobilnett

Blinker to ganger = Koblet til mobilnett


RØD LED:



Blinker sakte = Lading pågår

Fast lys = Fulladet

BLÅ LED:

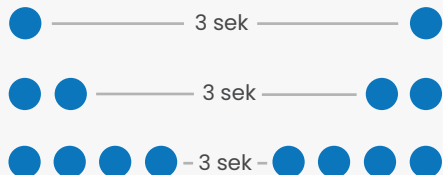

Blinker sakte = Søker etter GPS-signal

Blinker to ganger = GPS-signal mottatt

Blinker fire ganger = Tilkoblet WiFi

Kom i gang – Last ned MiniFinder Live

For å begynne å bruke din **MiniFinder Pico** må du først laste ned MiniFinder Live-appen.

Hvis du leser denne veiledningen på mobilen, kan du ganske enkelt klikke på ikonene for Google Play eller App Store for å komme direkte til nedlastingssiden. Alternativt kan du åpne App Store eller Google Play manuelt og søke etter "MiniFinder Live" for å installere appen.



Forklaring av talemeldinger

A Din mobile trygghetsalarm lades

Din MiniFinder Pico er koblet til en strømkilde og lades

B Batteriet er lavt, lad batteriet

Batterinivået på din MiniFinder Pico er lavt, og du bør lade den. Meldingen gjentas tre ganger

C Alarmen din er aktivert – trykk på SOS-knappen for å avbryte alarmen

SOS-alarmen er aktivert. Trykk på MiniFinder-knappen for å avbryte alarmen før den begynner å ringe

D Fallalarmen er aktivert – trykk på SOS-knappen for å avbryte alarmen

Fallalarmen er aktivert på din MiniFinder Pico. Trykk på MiniFinder-knappen for å avbryte alarmen

E Ringer kontakt nummer X

Enheten ringer nå opp de autoriserte telefonnumrene som du har lagt inn i appen

Den går videre til neste nummer hvis det nåværende ikke svarer

Aktivere SOS-Alarm

Trykk og hold inne alarmknappen i 3 sekunder. Enheten vil vibrere og gi talemeldingen:

"Alarmen din er aktivert"

Meldingen gjentas tre ganger. Hvis alarmen ikke avbrytes, begynner enheten å ringe den første forhåndsvalgte kontakten.

Avbryte SOS-Alarm

Alarmen kan avbrytes mens talemeldingen spilles av ved å trykke på alarmknappen. Hvis alarmen ikke avbrytes, fortsetter enheten å ringe de forhåndsinnstilte nødkontaktene i angitt rekkefølge. Når oppringingen har startet, kan alarmen som standard ikke avbrytes.



3 Sekunder
SOS-alarm aktivert

>>>



Trykk én gang for å
avbryte SOS alarmen.

Fallalarm

MiniFinder Pico kan automatisk registrere et fall. Når dette skjer, vibrerer enheten.

Mens talemeldingen spilles av, kan brukeren avbryte alarmen ved å trykke på alarmknappen. Hvis alarmen ikke avbrytes innen den forhåndsinnstilte tidsperioden, vil enheten ringe opp nødkontaktene.



Vibrerer ved
automatisk fallalarm



Trykk én gang for å
avbryte fallalarmen

Spesifikationer

Mål	60 mm x 41 mm x 16 mm
Vekt	40g
Batteritid	36-40h med 5-minutters intervall
Tilkobling	LTE: B1, B3, B7, B8, B20
Strømkilde	5V DC 1.0A
SIM	Forhåndsinstallert
Talesamtale	Ja
Fallalarm	Ja
Sensor	Akselerometer, 3-akset

Sikkerhetserklæring

Dette utstyret er testet og oppfyller sikkerhetskravene i henhold til EN-standard: EN60950-1:2006 + A12:2011.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye

Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse

Vær oppmerksom på alle advarsler

Følg alle anvisninger

Ikke forsøk å manipulere din MiniFinder®

Bruk ikke slipende rengjøringsmidler

Ikke legg MiniFinder® i oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel

Ikke utsett MiniFinder® for ekstrem varme eller kulde

Ikke bruk MiniFinder® i badstue eller dampbad

Ikke la MiniFinder® ligge i direkte sollys over lengre tid

Ikke plasser MiniFinder® nær åpen ild

Forsøk ikke å demontere MiniFinder® – den inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren

Gjenvinningsinformasjon

Symbolet på produktet eller emballasjen viser at det skal kasseres separat fra husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Det er ditt ansvar å sørge for at elektronisk utstyr gjenvinnes på riktig måte ved godkjente innsamlingspunkter – for å bidra til bevaring av naturressurser.